

# Cómo cuidar su catéter

## Cómo cambiar su casquete de inyección

### **Antes de comenzar**

1. *Lávese bien las manos.*
2. *Prepare un área de trabajo limpia.*
3. *Reúna los siguientes artículos:*
  - *Casquete de inyección preenvasado*
  - *Hisopillos antisépticos*

El casquete de la inyección conectado al extremo de su catéter se usa para conectar su catéter IV y debe cambiarse periódicamente. Su enfermera le explicará con cuánta frecuencia debe cambiar este casquete.


---

---


---

---

### **Pasos básicos**

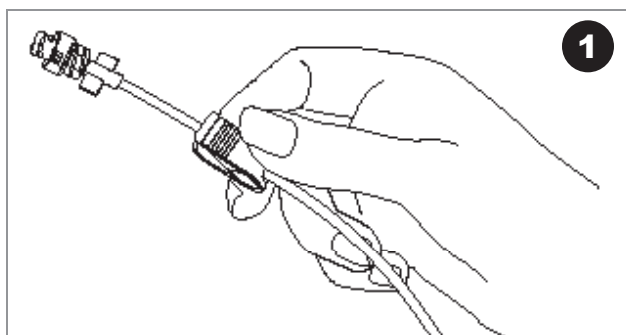


1. Cierre la abrazadera de su catéter.  
**NOTA:** NO la cierre si es un catéter Groshong®.
2. Sosteniendo la conexión con una mano, limpie bien el área con un hisopillo antiséptico.

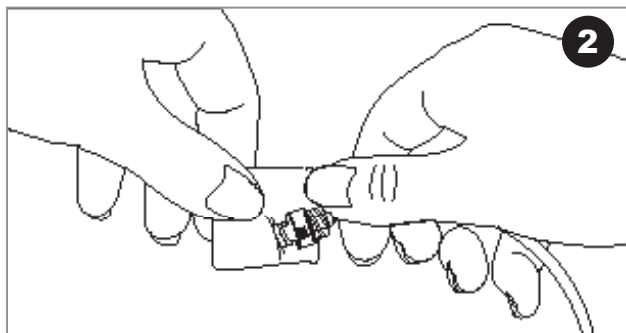





3. Abra el paquete que contiene el nuevo casquete de inyección y saque el nuevo casquete sosteniéndolo de su revestimiento protector.

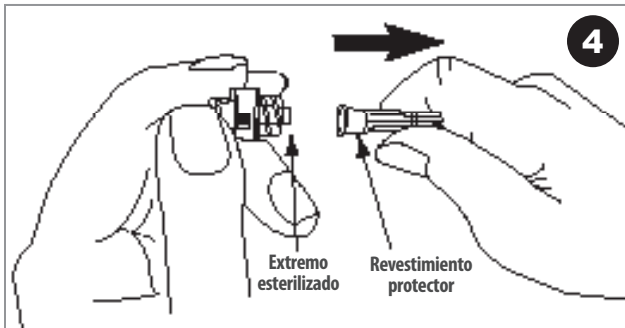

4. Quite el revestimiento protector de la base del nuevo casquete de inyección, teniendo cuidado de no tocar el extremo esterilizado del casquete con los dedos.

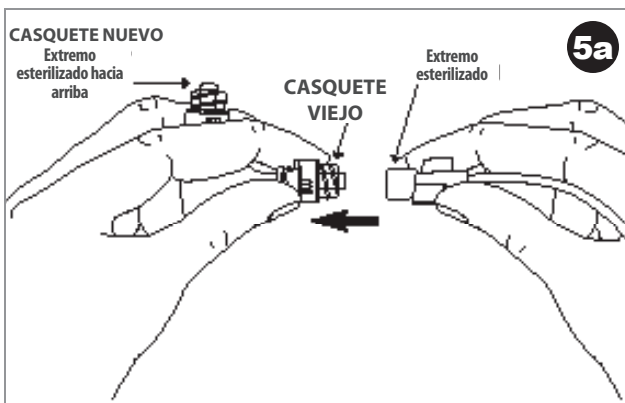

5. Sosteniendo el nuevo casquete entre los dedos de una mano, desenrosque el viejo casquete con la otra mano (*fig. 5a*), teniendo cuidado de no tocar el extremo esterilizado de la conexión. Atornille firmemente el nuevo casquete, teniendo cuidado de no tocar los extremos esterilizados del nuevo casquete o de la conexión con sus dedos (*fig. 5b*).

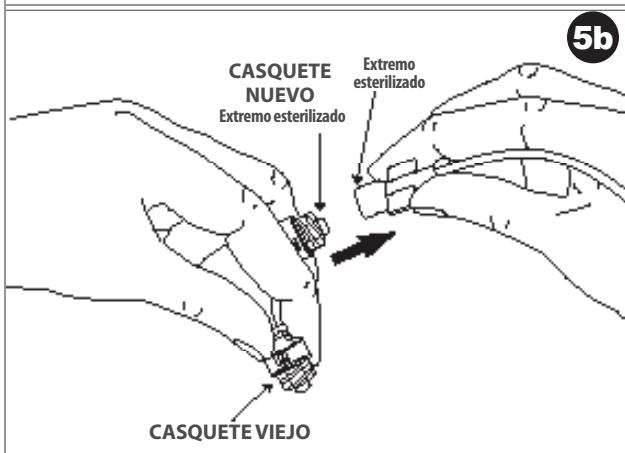

6. Si su catéter tiene más de un lumen, tendrá que cambiar el casquete de la inyección para cada lumen.

**Sugerencia:** Cambie los casquetes en orden según el "color" alfabético, por ejemplo: *B*- blanco, *M*- marrón, *R*- rojo. Esto le permitirá saber qué casquetes ya cambió para que no se olvide de ninguno.