

Guía de administración

Bomba Freedom60[®]

Preparación

Consulte su tapete de capacitación sobre SASH para obtener más información.

1. **Limpie** el área de trabajo.
2. **Lávese** las manos.
3. **Reúna** los insumos:
 - Bomba Freedom60
 - Jeringa Luer Lock de 50 ml
 - Pin dispensador con minipunta
 - Conjunto de aguja subcutánea (SC) (el paquete contiene un apósito transparente pequeño)
 - Tubo de velocidad de flujo de administración (controla la velocidad de infusión)
 - Toallitas con alcohol
 - Gasa/apósitos adhesivos
 - Contenedor para desechos punzantes
4. **Inspeccione** el medicamento y la etiqueta para verificar:
 - Que el nombre del paciente sea correcto
 - Que el medicamento y la dosis sean los correctos
 - Que el medicamento no esté vencido
 - La duración de la infusión
 - Que la sustancia sea transparente, el color sea parejo y no tenga partículas visibles
2. Limpie la parte superior del envase con una toallita con alcohol.
3. Retire la tapa transparente del pin dispensador con minipunta. Inserte la punta dentro del envase del medicamento.



4. Retire la tapa azul del pin dispensador con minipunta. Conecte el pin dispensador con minipunta a la jeringa Luer Lock de 50 ml. **No inserte aire dentro del envase.**
5. Invierta el envase (vólteelo). Extraiga el medicamento dentro de la jeringa de 60 ml.
6. Repita estos pasos para agregar cada envase del medicamento hasta alcanzar la dosis total que su médico indicó.

Prepare el medicamento

1. Retire la tapa protectora del envase.

7. Quite la minipunta de la jeringa. Deseche la minipunta en un contenedor para desechos punzantes.

Nota: Si tiene que agregar varios envases de medicamentos, use el mismo pin dispensador y la misma jeringa para todos los envases del medicamento. Se ha incluido un pin dispensador con minipunta de repuesto por si se produce contaminación o si la punta pierde filo. Si usa el pin dispensador con minipunta de repuesto, avísele a su enfermero de Coram^{®*} para que pueda reemplazarlo.

Bebe la vía

1. Conecte la jeringa con el medicamento al extremo del tubo de velocidad de flujo. Gire a la derecha hasta que esté firme.
2. Conecte el conjunto de la aguja SC al otro extremo del tubo de velocidad de flujo.
3. Presione suavemente el émbolo de la jeringa para llenar el tubo con medicamento.

Nota: Para ayudar a minimizar las reacciones en el lugar de la inyección, beba el medicamento por completo hasta el extremo del tubo, pero **no hacia adentro** de las agujas SC.

Prepare el lugar de la inyección


1. Seleccione el lugar de la inyección. Elija un área en su abdomen, muslo o parte superior del brazo, o fuera de la parte superior de la pierna/cadera para la infusión. Use un lugar diferente al de la última vez que se aplicó la infusión. Nunca aplique una infusión en las áreas en las que la piel esté sensible, magullada o endurecida. Evite aplicar la infusión en cicatrices o estrías.
2. Si está usando más de un lugar de inyección, asegúrese de que entre cada lugar haya una separación de al menos dos pulgadas (5 cm).

3. Use una toallita con alcohol para limpiar cada lugar antes de insertar las agujas SC. Limpie cada lugar comenzando en el centro, con movimientos circulares hacia afuera. Permita que cada lugar se seque al aire antes de continuar.



Inserte la aguja SC


1. Con dos dedos, pellizque la piel alrededor del lugar de la inyección. Inserte la aguja en la piel, en un ángulo de 90 grados.

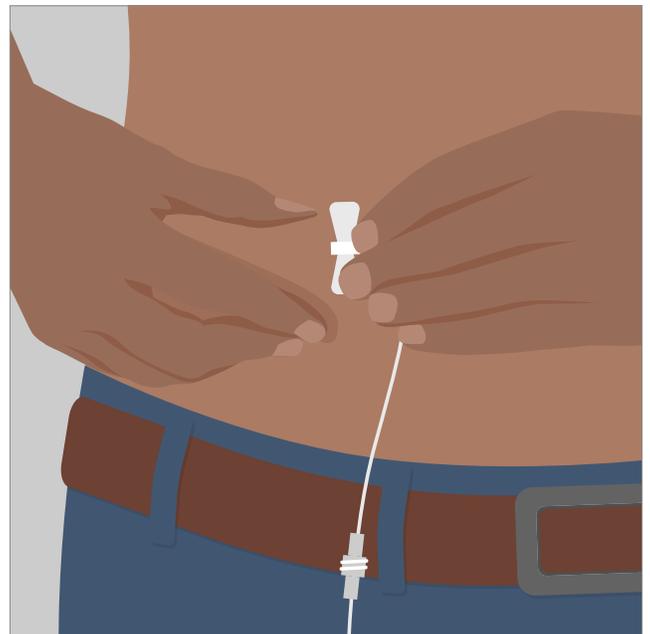

2. Coloque un apósito transparente sobre el lugar de la inyección. Asegúrese de cubrir todos los lugares donde insertó las agujas. Esto ayudará a prevenir infecciones y a evitar que las agujas se salgan.

Cargue la jeringa en la bomba

1. Compruebe que la bomba esté en la posición de apagado (“off”).
2. Verifique que la lengüeta negra en la cubierta retroceda por completo antes de colocar la jeringa en la bomba.
3. Gire el control giratorio hacia la derecha. Esto ayuda a mover la lengüeta negra hasta el final de su recorrido.
4. Inserte la jeringa dentro de la bomba con los números hacia arriba. Asegúrese de que el disco Luer de la jeringa esté bien colocado en la ranura del disco, en la “nariz” de la bomba. La ranura del disco está en el extremo opuesto de la lengüeta negra.

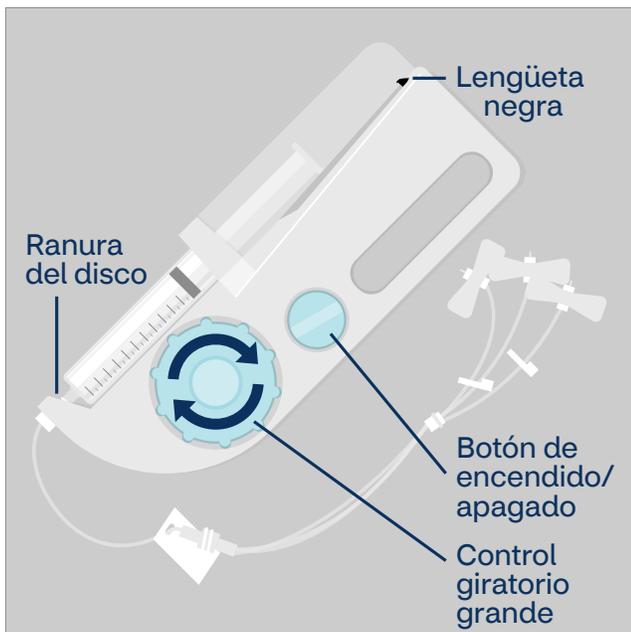

Comience la infusión

1. Abra todas las pinzas.
2. Gire la bomba a la posición de encendido (“on”) para comenzar la infusión.
3. La lengüeta negra se moverá hasta alcanzar el extremo del émbolo de la jeringa y se trabará en el lugar. La infusión comenzará automáticamente después de que ocurra esto.

Detenga la infusión

1. Cuando la jeringa esté vacía, gire el botón a la posición de apagado (“off”).
2. Gire la perilla grande hacia la derecha para alejar la lengüeta negra de la jeringa.
3. Retire la jeringa de la bomba.

Nota: Si usa varias jeringas, desconecte la jeringa vacía del tubo de velocidad de flujo. Conecte la jeringa nueva llena de medicamento y repita los pasos anteriores para cargar la jeringa en la bomba.

4. Saque los apósitos y las agujas. Deseche las agujas en un contenedor para desechos punzantes.
5. Si es necesario, coloque un apósito en el lugar donde se colocó la inyección.

Reacciones en el lugar donde se colocó la inyección

Los efectos secundarios más comunes de la terapia de inmunoglobulina subcutánea (IgSC) son las reacciones que pueden ocurrir alrededor del lugar de la inyección. Estas reacciones en el lugar pueden provocar sensibilidad, y el tamaño puede variar desde una moneda de diez centavos hasta más grande que medio dólar.


Es posible que tenga reacciones de leves a moderadas en el lugar donde se colocó la inyección. La mayoría de las reacciones mejoran dentro de las 24 a 48 horas después de la infusión. Además, será menos propenso a tener reacciones en el lugar de la inyección a medida que continúe con la terapia IgSC.

Reacción leve en el lugar donde se colocó la inyección

Esto es normal después de una infusión de IgSC. Es posible que note una hinchazón del tamaño de una **moneda de diez o de veinticinco centavos**. Otros síntomas incluyen enrojecimiento, comezón o molestia.

Reacción moderada en el lugar donde se colocó la inyección

Esto es normal después de una infusión de IgSC. Es posible que note una hinchazón del tamaño de una **moneda de medio dólar, una ciruela, un durazno o una toronja**. Otros síntomas incluyen enrojecimiento, comezón o molestia moderados.

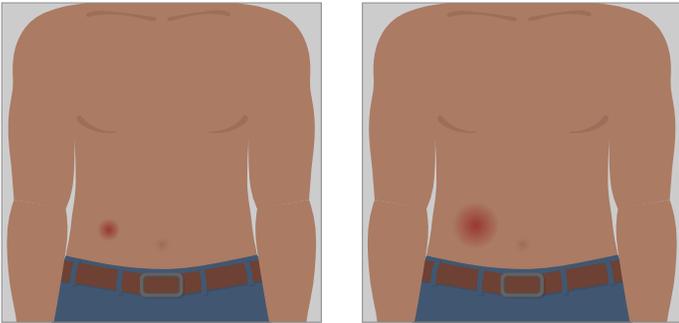

La diferencia entre una reacción leve y una moderada es el tamaño de la hinchazón y el nivel de enrojecimiento en el lugar de la inyección.

Si la reacción en el lugar donde se colocó la inyección no mejora dentro de las 24 a 48 horas, comuníquese con su enfermero.

¿Desea obtener más información?

Encuentre más información útil en nuestro Centro de recursos, en [CoramHC.com](https://www.coramhc.com).

*Servicios de infusión de Coram, de CVS Specialty®

SASH (SASH = S: solución salina; A: administración del medicamento; S: solución salina; H: heparina).

Esta información no sustituye la asesoría o el tratamiento médico. Hable con su médico o proveedor de atención médica sobre esta información y realice todas las preguntas relacionadas con la salud que desee. Coram no se hace responsable en absoluto de la información que se brinde o de cualquier diagnóstico o tratamiento que se haya realizado a partir de esta información proporcionada.

Este documento incluye referencias a productos médicos de marca que son marcas comerciales o marcas registradas de compañías no afiliadas a CVS Specialty.

Su privacidad es importante para nosotros. Nuestros empleados reciben capacitación sobre la manera adecuada de manejar la información privada sobre su salud.

©2020 Coram LLC. Todos los derechos reservados. 75-53545AS 121820